

HAISE AMBULANCE

آمبولانس هایس پارس خودرو

Type A & Type B



مشخصات فنی هایس پارس خودرو

Engine:

Number of cylinders & Arrangement : 4 in-line

Total Displacement: 2438 (cc)

Max. Power: 132/4400 (hp/rpm)

Max. Torque: 219/3200 (N-m/rpm)

دارای استاندارد آلاینده‌ی یورو ۵



مشخصات فنی هایس پارس خودرو

Drive Train:

Transmission: 5 Speed Manual

Drive Axle: Rear Axle


Steering Wheel:

Steering Wheel, Hydraulic, Rack & Pinion

Brakes:

Front: Ventilated Disk + ABS

Rear: Drum

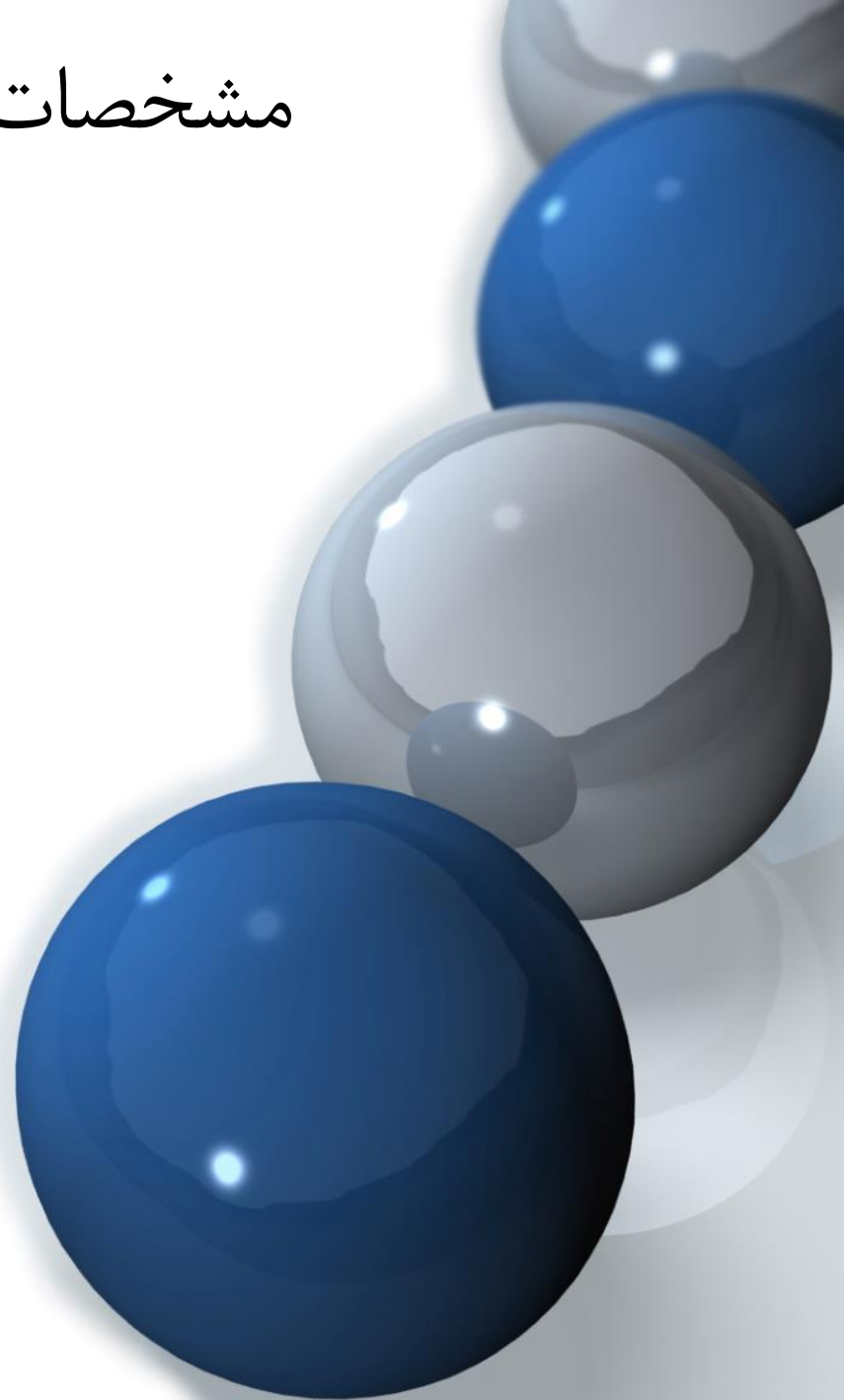

Major Features

- Driver airbag & Passenger airbag
- Anti-locking braking system (ABS) + EBD
- Front & rear air conditioning, air ducts, and adjustment of the debit in the rear
- Electric central door locking
- Right sliding door with opening window
- Rear Radar

“Exterior”



“Interior-Driver Cabin”

- دسترسی آسان راننده به سیستم آلارم و اینتر کام آمبولانس
- مجهز به کنسول راننده



كابين آمبولانس

Ambulance Cabin



Ambulance Cabinet

✓ کابینت تجهیزات پزشکی از جنس PVC مقاوم در برابر رطوبت:

✓ مجهز به کشو، و درب های قفل شونده. (قفل های Push Botton & Marine)

این قفل ها از باز شدن ناگهانی درب ها در هنگام مانورهای سریع آمبولانس جلوگیری می کند.

✓ بورد تجهیزات پزشکی جهت نصب ساکشن الکتریکی، دیفیبریلاتور، مانیتورینگ و ونتیلاتور.

✓ هت رک (Over Head Compartment) در امتداد سمت چپ کابین



پوشش کامل کابین بیمار از جنس کامپوزیت

- ✓ سقف یکپارچه کابین بیمار
- ✓ کاور دو طرف بدنه از جنس فایبرگلاس
- ✓ ۸ دریچه کولر در امتداد سقف جهت پخش هوای خنک در همه کابین
- ✓ جانمایی دو عدد هولدر IV در سقف
- ✓ Grab Bar در امتداد سقف جهت حفظ تعادل پرستار در هنگام حرکت

Digital Panel

✓ پنل کنترل کلیه سیستم های الکتریکی کابین

پنل اصلی با صفحه نمایشگر لمسی

پنل شماره ۲ در کابین راننده (این پنل به راننده این امکان را می دهد که کنترل کامل بر سیستم های الکتریکی آمبولانس داشته باشد).

پنل شماره ۳ نصب شده در نزدیکی درب عقب (این پنل این امکان را به پرسنل درمانی می دهد که در هنگام عملیات اورژانس با سرعت بالا بتوانند سیستم های الکتریکی کابین را فعال کنند).




سیستم سانترال اکسیژن

✓ هولدر حمل دو کپسول اکسیژن ۱۰ لیتری

✓ دو عدد آتلت اکسیژن نصب شده روی بورد تجهیزات

✓ قابلیت تعویض سریع کپسول ها

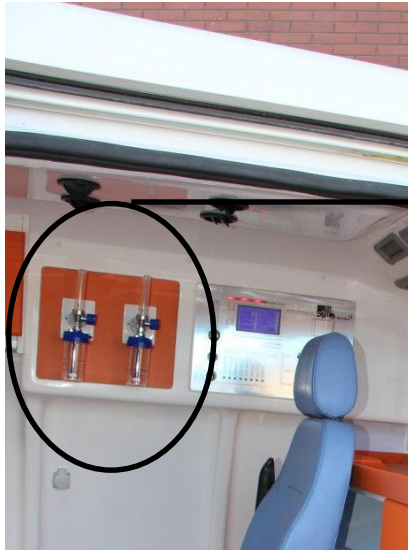

تجهيزات پزشکی مطابق استاندارد ۴۳۷۴



✓ برانکارد اتوماتیک

✓ کیف احیاء با تجهیزات کامل



تجهيزات پزشکی مطابق استاندارد ۴۳۷۴



✓ ساکشن الکتریکی

✓ کلیه تجهیزات پزشکی مطابق لیست تیپ A و یا تیپ B

Save a **LIFE** 

www.Allmed.ir



تولیدکننده آمبولانس، خودروهای ویژه و تجهیزات اورژانس
شرکت رای پیشران فلات